



www.vistetix.com.ua



vistetix@gmail.com



+38 093-694-22-08



Київ, вул. Трохимівська, 3

Фракційний IPL

140 комірок, подібних до фракційної концепції

Безпечніше лікування

Менше побічних ефектів, таких як тигрові смуги

Швидше лікування

Більший розмір плями та частота висока частота повторення до 5 Гц

Push-in фільтри

Зручна заміна діапазону довжин хвиль

Сім хвильових діапазонів

415, 530, 560, 590, 640, 690 та 755 фільтри

Інші

Розумний інтерфейс користувача, довжина хвилі 755 нм, як Alex, режим SHR, Динамічний режим, зручна установка маніпули

Клінічні показання



Пігментні ураження

- Сонячне лентиго
- Веснянки
- Мелазма
- Гіперпігментація

Омолодження

- Зморшки
- Розширені пори

Судинні ураження

- Телангіектазія
- Почервоніння
- Розацеа

Акне

- Видалення волосся

Технічна специфікація

Діапазон хвиль	415, 530, 560, 590, 640, 690, 755 нм (IPL - ксенонова лампа)
Фільтри	415, 530, 560, 590, 640, 690, 755 нм
Флюенс	1 - 32 Дж/см ²
Розмір плями	42,6 x 14,3 мм
Послідовність імпульсів	Одиночний, подвійний, потрійний, SHR, динамічний режим
Тривалість імпульсу	0,2-40 мс
Затримка імпульсу	1,0 -90 мс
Тривалість імпульсів	1, 3, 5,10 Гц
Світлопровідність	Кварц / сапфірове з'єднання
Охолодження	До 5°C (регулюється)
Вимоги до мережі	220В/16А,50/60Гц
Розмір (Ш*Г*В)	480 мм (Ш) X 650 мм (Г) X 1140 мм (В)
Вага	60 кг

Ami

ΔESTHETIC
MEDICAL
INNOVATION



SOLRAY
Фракційний IPL

CE

Огляд продукту

SOLRAY - це вдосконалений апарат фракційного IPL із передовою технологією, який забезпечує відмінні клінічні результати, водночас значно знижуючи ризик побічних реакцій, пов'язаних із традиційним лікуванням IPL.


Фракційний сапфіровий наконечник SOLRAY має 140 окремих комірок. Ця інноваційна технологія оптимізує ефективність лікування та мінімізує появу небажаних «тигрових слідів», що є поширеною проблемою при проведенні процедур IPL.

На додаток до чудового дизайну маніпули, SOLRAY пропонує виняткову універсальність завдяки 7 змінним фільтрам. Ці фільтри дозволяють апарату відповідати широкому спектру показань, що робить його придатним для пацієнтів з різними відтінками і типами шкіри.



140 клітинна технологія

- Технологія Multi-cell - сапфіровий фільтр з мікророзмірною структурою решітки.
- Ефективно утримує світлову енергію всередині окремих комірок, залишаючи між сусідніми комірками безпечну зону квадратної форми.
- Забезпечує збереження неушкоджених здорових тканин у безпечній зоні квадратного контуру, подібно до фракційної концепції.
- Безпечний для пацієнтів із засмаглою або темною шкірою.

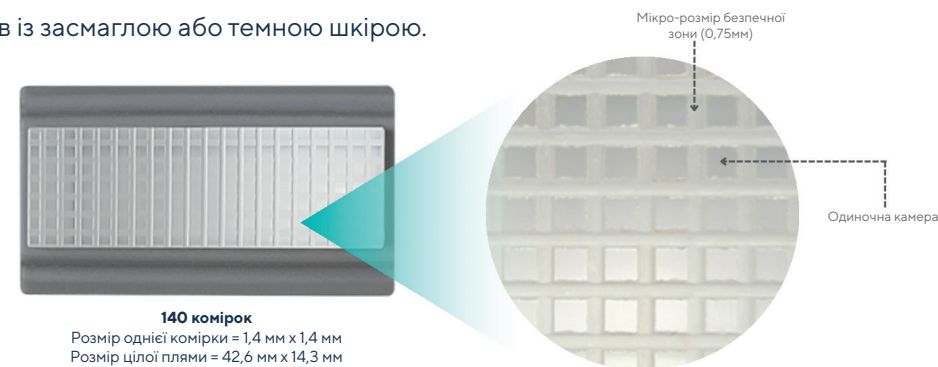

Розумний інтерфейс

- Передбачено два типи вибору режимів - лікування шкіри та видалення волосся




Змінні фільтри з сімома діапазонами хвиль

- Змінні фільтри.
- Зручна заміна фільтрів без необхідності заміни маніпули.
- Спрощує процес лікування, покращуючи досвід користувача, а також скорочуючи час лікування




Безпечніше лікування

- Створює безпечну зону квадратного контуру між сусідніми комірками, подібно до концепції фракційного лазера.
- Призводить до утворення множинних дрібних везикул, імітуючи ефект фракціонування та мінімізуючи ризик виникнення постзапальної гіперпигментації або рубцювання.
- Забезпечує безпечне використання навіть для пацієнтів із засмаглою або темною шкірою.

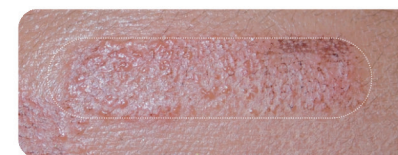


Через 48 годин після надмірного оброблення Solray спостерігається, що замість єдиного пухиря утворилися лише численні крихітні везикули.

Параметри передозування: 415 нм, 35 мс і 5 мс (затримка 20 мс), 12 Дж/см². Зауважте, що нормальні дози зазвичай становлять лише від 7 до 8 Дж/см²

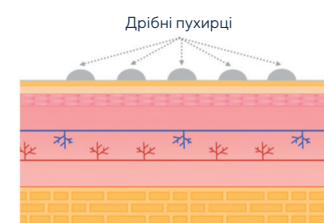

SOLRAY

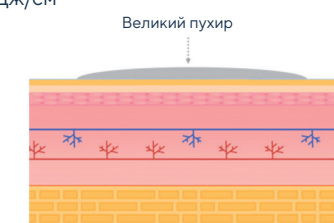

Інші

